



CONTACTO VISUAL
NICARAGUA S.A.




La ciencia de la visión natural se une a la ciencia de NaturalVue®

A diferencia de las lentes monofocales o multifocales tradicionales, la tecnología Neurofocus Optics de NaturalVue® crea una profundidad de enfoque ampliada para ofrecer un rango de visión clara más amplio. Para los pacientes miopes y presbítas, las lentes de contacto NaturalVue (etafilcon A) Enhanced Multifocal 1 Day ofrecen una mayor profundidad de enfoque para proporcionar una visión clara más amplia.


La tecnología Neurofocus Optics® crea una profundidad de enfoque ampliada

LENTES NATURALVUE CON NEUROFOCUS OPTICS®

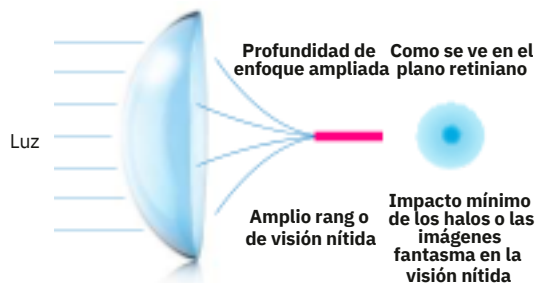

- Permite un rango completo de visión nítida, incluso para presbítas 1 maduros (Edad 50+, potencia ADD $\geq 2,00$ D).
- Permite una visión perfecta a todas las distancias²
- La estereoacuidad* de los usuarios es dos veces mejor que la de las principales lentes probadas.³

LENTES MULTIFOCALES TRADICIONALES

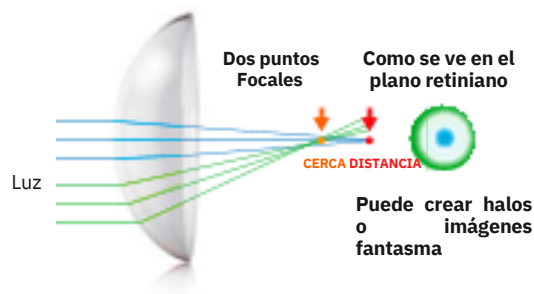


- Los diseños multifocales tradicionales con dos puntos focales pueden hacer que los usuarios experimenten una visión comprometida, por ejemplo:
- Disminución de la visión de cerca o de lejos
- Fantasmas y/o halos

Cómo funciona la tecnología Neurofocus Optics® para la miopía y la presbicia


TECNOLOGÍA NEUROFOCUS OPTICS®

DISEÑO DEL LENTE

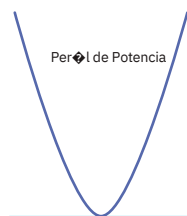


+6,00D a +8,00D de progresión suave, rápida e ininterrumpida de **más potencia** moviéndose hacia fuera desde el centro de distancia.

DESENFOQUE PERIFÉRICO

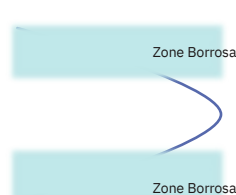


El desenfoque periférico inducido por la alta potencia plus es difuso, por lo que puede ser suprimido por la corteza visual. El cerebro adapta fácilmente el diseño sin sacrificar la visión.

EFFECTO PIN HOLE

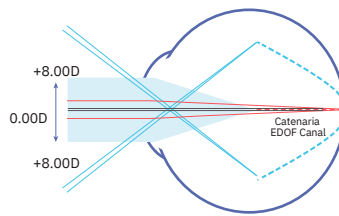

El canal EDOF (efecto estenopeico) y las zonas de desenfoque se crean por la gran cantidad de progresión rápida y continua de potencia plus.

VISIÓN CLARA

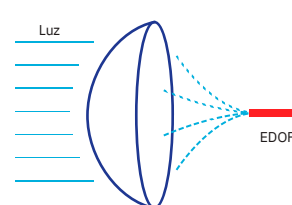

Mayor rango de visión clara a lo largo del eje visual.

BENEFICIOS

Para MIOPIES: El lente proporciona una visión excelente y ha demostrado su eficacia en la **reducción de la progresión de la miopía**.⁶ Con rangos de potencia completos de +4,00D a -12,25D, muchos de sus pacientes míopes pueden ser corregidos.

Para PRESBIOPOS: A diferencia de las lentes monofocales o multifocales tradicionales, **NaturalVue® Multifocal con Neurofocus Optics®** crea una gama más amplia de visión nítida para reducir el compromiso visual y mantener a los pacientes más satisfechos a medida que cambian sus necesidades visuales. El lente permite una visión excelente a cualquier distancia.

Beneficios de NaturalVue® Multifocal Mejorado

- ▶ Menor compromiso visual
- ▶ Menor tiempo en la silla
- ▶ Un lente que mantiene a los pacientes vinculados a la consulta con un alto índice de captación
- ▶ Mantener contento al paciente durante más tiempo
- ▶ Aumentar las referencias

Especificaciones de los lentes multifocales mejorados NaturalVue®

Rango de potencia total: De +4.00D a -12.25 en pasos de 0,25D (rango completo)

Diseño: Profundidad de enfoque ampliada (distancia central), pupila independiente

Curva Base: 8.3

Tinte de Manipulación: Luz Azul

Paquete: TBD

ADD: Profundidad de foco ampliada, ADD Universal; requisitos de potencia ADD hasta 3,00D

Material: etafilcon A (58% Contenido de Agua)

Diámetro: 14.5

Modalidad: De un solo uso diario

Reemplazo: Desechable diario

UV Protection: Bloqueador de UV de clase 2. El bloqueo UV es del 98% de media en la gama UVB de 280 nm a 315 nm y del 84% en la gama UVA de 316 nm a 380 nm.***

INDICACIONES DE USO NATURALVUE® NaturalVue® (etafilcon A) Multifocal 1 Day Disposable Soft Contact Lenses are indicated for daily wear for the correction of refractive ametropia (myopia and hyperopia), and/or presbyopia and myopia progression control in normal eyes.

*Estadísticamente significativo

**Los lentes de contacto absorbentes de UV no sustituyen a las gafas protectoras absorbentes de UV (por ejemplo, gafas protectoras absorbentes de UV o gafas de sol) porque no cubren completamente el ojo y la zona circundante. Los pacientes deben seguir utilizando gafas que absorban los rayos UV siguiendo las indicaciones. Nota: La exposición prolongada a la radiación UV forma parte de los factores de riesgo asociados a las cataratas. La exposición depende de varios factores, por ejemplo las condiciones ambientales (altitud, geografía, nubosidad) y los factores personales (extensión y naturaleza de las actividades al aire libre). Las lentes de contacto absorbentes de UV ayudan a proporcionar protección contra la radiación UV nociva. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que el uso de lentes de contacto absorbentes de UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos oculares. Consulte a su oculista para obtener más información.

El resumen de referencia para el diagrama incluye: Cooper J, O'Connor B, Aller T, et al. Reducción de la progresión miópica utilizando una lente de contacto blanda multifocal: Un estudio de cohortes retrospectivo. Clin Ophthalmol. 2022 Jul;16:2145-2155. doi: 10.2147/OPTH.S370041. PMID: 35814919; PMCID: PMC9270009. Chima AS, Formankiewicz MA, Waugh SJ. Investigation of interocular blur suppression using luminance-modulated and contrast-modulated noise stimuli. J Vis. 2015 Mar 26;15(3):22. doi: 10.1167/15.3.22. PMID: 25814548. Maiello G, Walker L, Bex PJ, Vera-Diaz FA. Blur perception throughout the visual field in myopia and emmetropia. J Vis. 2017 May 1;17(5):3. doi: 10.1167/17.5.3. PMID: 28476060; PMCID: PMC5425112.

Referencias: 1. Datos VTI en archivo, 2023. n=24. Datos evaluados tras la adaptación de la lente. 2. Datos VTI en archivo, 2015. n=59. Datos evaluados tras una semana de uso frente a otras lentes tradicionales (con dos focos) estudiadas. 3. Datos VTI en archivo, 2021. n=53. Datos evaluados tras una semana de uso.



CONTACTO VISUAL
NICARAGUA S.A.

8978-5220

www.contactovisualnicaragua